

BAT KT7 (USA) BAT KT8 (International)

Charger for PockeTalker 2.0

QUICK SETUP GUIDE

BAT KT7

(Power Supply & Cable)



BAT KT8 (BAT KT7 + 3 Adapters)

Power Supply Safety Warnings

1. Never charge the unit in enclosed spaces such as handbags, cases, or other closed storage bags.
 2. Unplug this device during lightning storms, or when charging is complete and the device is unused for long periods of time.
 3. Use correct adapter for country of use.
 4. Use only the power supply provided by the manufacturer of this device. Other power supplies may have similar specifications, but may not be equivalent. Use of an unapproved power supply may leave the device partially or completely inoperable, and will void the warranty.
 5. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, receptacles, and near the power jack on the unit.
-

Product Description

The BAT KT7 and BAT KT8 are designed for charging the Williams Sound PockeTalker 2.0 when used with NiMH batteries.

The **BAT KT7** is the USA version with no adapters.

The **BAT KT8** is the International version with supplied adapters for the UK, Europe, and Australia.

WARNING: USE THIS CHARGER WITH WILLIAMS SOUND NiMH RECHARGEABLE BATTERIES ONLY.


DO NOT USE non-rechargeable batteries, such as alkaline and carbon zinc, **WHICH** may heat up and burst, causing possible injury and damage to the equipment.

BEFORE CONNECTING THE CHARGER TO THE POCKETALKER, MAKE SURE THE POCKETALKER HAS NiMH RECHARGEABLE BATTERIES INSTALLED.

Setup and Operating Instructions

1. Make sure you have the correct adapter for the country of use.
 2. Open the battery compartment and insert two AAA NiMH batteries. Be sure to follow correct polarity.
 3. Set the battery switch (located inside the battery compartment) to the NiMH position.
 4. Plug the USB A Plug into the USB A Port on the power supply.
 5. Plug the USB Micro-B connector into the charging port on the PockeTalker (Figure 1).
 6. Plug the power supply (with correct international adapter, where necessary) into an AC wall outlet. An indicator light on the power supply will illuminate to indicate the power supply has AC power.
 7. The charging indicator on the PockeTalker will blink slowly while the batteries are being charged, then stay on when the batteries are fully charged.
 8. It will take approximately 16 hours to fully charge the batteries.
-

Figure 1: PockeTalker 2.0 Charging Connection

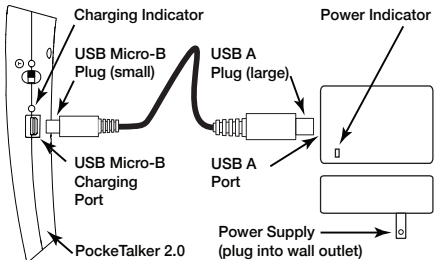

Warranty

The BAT KT7 and BAT KT8 are covered by a 90 day warranty.

Customer Service

If you experience difficulty with your system, call Toll-Free for Customer Assistance:

1-800-328-6190 (U.S.A.) or

+1 952 943 2252 (Outside the U.S.A.)

If it is necessary to return the system for service, your Customer Service Representative will give you a Return Authorization Number (RA) and shipping instructions.



10300 Valley View Rd • Eden Prairie, MN 55344
800-328-6190 / 952-943-2252 • FAX: 952-943-2174
www.williamssound.com

©2015 Williams Sound LLC

BAT KT7 (EE.UU.) BAT KT8 (Internacional)

Cargador para Pocketalker 2.0

GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

BAT KT7

(Fuente de alimentación y cable)



BAT KT8 (BAT KT7 + 3 adaptadores)

Advertencias de seguridad sobre las fuentes de alimentación

1. Nunca cargue la unidad en espacios cerrados, tales como bolsos de mano, estuches u otros accesorios de almacenamiento cerrados.
2. Desconecte este dispositivo durante tormentas eléctricas, cuando se complete la carga y cuando no lo vaya a utilizar por largos períodos de tiempo.
3. Tenga en cuenta que los distintos voltajes de funcionamiento requieren el uso de cables con diferentes tipos de enchufe. Verifique el voltaje de línea en su área y utilice el tipo correcto.
4. Use únicamente la fuente de alimentación suministrada por el fabricante de este dispositivo. Otras fuentes de alimentación pueden tener especificaciones similares, pero podrían no ser equivalentes. El uso de una fuente de alimentación no aprobada podría dejar el dispositivo parcial o totalmente inservible y anulará la garantía.
5. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, receptáculos y cerca del conector de alimentación de la unidad.

Descripción del producto

Los cargadores BAT KT7 y BAT KT8 están diseñados para cargar la unidad PockeTalker 2.0 de Williams Sound cuando se utiliza con baterías de NiMH.

El BAT KT7 es la versión para EE.UU., sin adaptadores.

El BAT KT8 es la versión internacional, con adaptadores para el Reino Unido, Europa y Australia.


ADVERTENCIA: USE ESTE CARGADOR ÚNICAMENTE CON BATERÍAS DE NiMH RECARGABLES DE WILLIAMS SOUND.

NO UTILICE baterías no recargables, como las alcalinas y las de carbono-zinc, LAS CUALES pueden calentarse y explotar, causando posibles lesiones físicas y daños a los equipos. Antes de CONECTAR el cargador al POCKETALKER, ASEGURESE de que EL POCKETALKER tenga instaladas baterías de NiMH RECARGABLES.

Instrucciones de configuración y operación

1. Asegúrese de tener el adaptador correcto para el país en cuestión.
2. Abra el compartimento de la batería e inserte dos baterías AAA de NiMH. Asegúrese de observar la polaridad correcta.
3. Coloque el conmutador de batería (ubicado dentro del compartimento de la batería) en la posición NiMH.
4. Inserte el conector USB A en el puerto USB A de la fuente de alimentación.
5. Inserte el conector micro USB B en el puerto de carga del PockeTalker (Figura 1).
6. Conecte la fuente de alimentación (con el adaptador internacional correcto, si es necesario) a una toma de CA de pared. Un indicador luminoso en la fuente de alimentación se iluminará para indicar que la fuente está recibiendo corriente alterna.
7. El indicador de carga del PockeTalker parpadeará lentamente mientras se cargan las baterías y quedará fijo cuando las baterías estén completamente cargadas.
8. Las baterías se cargan por completo en aproximadamente 16 horas.

Figura 1: Conexión de carga del PockeTalker 2.0

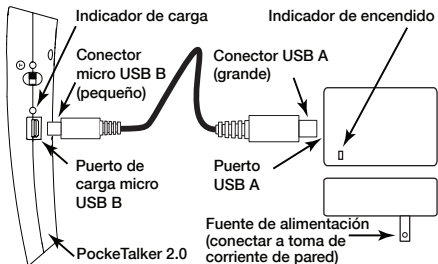

Garantía

Los cargadores BAT KT7 y BAT KT8 están cubiertos por una garantía de 90 días.

Servicio al cliente

Si tiene problemas con su sistema, llame a la línea gratuita de atención al cliente:

1-800-328-6190 (EE.UU.) o

+1 952 943 2252 (fuera de EE.UU.)

Si es necesario devolver el sistema para prestarle servicio, su representante de servicio al cliente le dará un número de autorización de retorno (RA) y las instrucciones de envío.



10300 Valley View Rd • Eden Prairie, MN 55344
800-328-6190 / 952-943-2252 • FAX: 952-943-2174
www.williamssound.com

©2015 Williams Sound LLC